



Portabler Raum-
zu-Raum Lift

Einzigartiges Design



Unser Roomer S Deckenlifter ist ein portabler Lifter, der die Möglichkeit bietet, einen Patienten von einem Raum in einen anderen zu transferieren, ohne irgendeine Modifikation an den Türstürzen vornehmen zu müssen.

Eine angenehme Erfahrung

Der Roomer S bietet einen optimalen Komfort, wenn er mit unserem Gurtprogramm kombiniert wird. Die Raum-zu-Raum Funktion reduziert die Anzahl der benötigten Lifter und minimiert die Belastung für Patient und Pflegekraft. Er bietet einen sanften Transfer durch eine konstante Hubgeschwindigkeit, unabhängig von Gewicht und Position des Patienten und macht so aus dem Hubvorgang eine angenehme Erfahrung. Der Lifter hat eine Gewichtskapazität von 220kg/484lb und kann mit einem 2, 3 oder 4-Punkt Bügel verwendet werden.

Einzigartiges Design

Da keine Änderung an den Türöffnungen erforderlich ist, eignet sich der Roomer S für Räume mit Schiebe- oder Brandschutztür. Das macht die Installation einfach.

Das einzigartige Design macht Drehscheiben und Weichen überflüssig. Für den Roomer S ist ein Drehbügel mit Sicherheitsverschluss in zwei unterschiedlichen Breiten verfügbar, die für die meisten Hebesituationen geeignet sind. Die Ladung kann für optimale Effizienz über die Handbedienung erfolgen.

Intelligentes Liftsystem

Der Roomer S verfügt über eine erweiterte Technologie-Plattform, die die Verfolgung der Liftnutzung und Visualisierung der gesammelten Daten ermöglicht. Die gespeicherten Daten können durch unseren Servicetechniker auf einem Tablet oder Computer abgerufen werden. Detaillierte Informationen können direkt angezeigt oder auf andere Medien exportiert werden, um zusätzliche Analysen vorzunehmen.

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone: +46 8 665 35 00
Fax: +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754
Phone: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com

Zubehör



Drehbügel

Schnellverschluss für optimalen Komfort. Bestellung separat. Artikelnr.: 55763 (35 cm) 55751 (45 cm) 55764 (55 cm)



Abdeckcover

Schützt den Benutzer vor Verletzungen. Bestellung separat. Artikelnr.: 50866



4-Punkt Aufhängung

Ermöglicht die Gurteinhängung an vier Aufnahmepunkten. Artikelnr.: 55619



Transportwagen

Vereinfacht den Transport des Lifters zwischen den Räumen. Bequeme Aufbewahrung der Gurte. Artikelnr.: 70346



Basic Sling

Das Basic Sling ist ein bequemes Tragetuch ohne Verstärkungen, Griffe oder polsterung. Sehen Sie sich unser gesamtes Sling-Portfolio auf unserer Website an.



Ladegerät mit Halterung

Einfach an der Wand zu montieren. Artikelnr.: 50899



Distanzgurt

Stabiles Nylongewebe mit Metallhaken. Verlängert den Zuggurt bis 100 cm. Artikelnr.: 20124-xx (Länge angeben)



Waage

Medizinische Waage. Maximale Kapazität: 320 kg. ISO und EN konform. Artikelnr.: 50590 (RoomerS & Altair) 50591 (Heliq)




Handbedienung

2 Geschwindigkeiten mit Auf/Ab Modus. Eingang für Ladegerät und USB-Schnittstelle IPX7. Part no.: 71457



Zusätzliches Bedienfeld

Bedienfeld auf der Rückseite des Lifters für die Not-Aus Funktion. Im Lieferumfang enthalten.

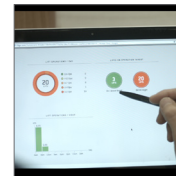

Intelligentes Liftsystem

Intelligente, cloud basierende Technologieplattform, die die Speicherung von Daten ermöglicht. Im Lieferumfang enthalten.

*Spreader Bar Small: 92441 ist manual.

Technische Daten

Beschreibung		Roomer S	
Artikelnr. (Lifter)	55300H-[länderspezifischer Code*]	Artikelnr. (Bügel)	35 cm: 55763 45 cm: 55751 55 cm: 55764
Abmessungen (BxHxL)	40cm x 16cm x 30cm 15.7" x 6.2" x 11.8"		
Belastbarkeit	220kg/484lb		
Gewicht des Lifters Gewicht des Bügels	8.9kg / 19.6lb 1.3kg/2.8lb (55751) or 1.5kg/3.3lb (55764)		
Batterie	2.9Ah, 2x12V		
Ladegerät	Eingang: 100-240V, AC 50-60 Hz Ausgang: 27.8V, 0.8A DC		
IP Klasse	Lift: IPX4 Handbedienung: IPX7		
Hubhöhe Hubgeschwindigkeit	Hubhöhe: 21.2cm/8.3" Hubgeschwindigkeit: 1.8m/min - 3m/min — 70"/min - 118"/min		
Zulassung	ROHS-2 Zulassung, getestet und zugelassen nach ISO 10535 ETL gelistet		
Notablass	elektronisch und mechanisch		

länderspezifischer Code: AU-Australia, GB-Great Britan, EU-Europe, JP-Japan, NA-North America

