



Rückenpolsterung

weiche Achselpolster

weite Öffnung



Ideal für den Toilettengang

Unser Toiletten-Gurt bietet eine praktische und komfortable Lösung für die Pflegekraft und den Patienten/ Pflegebedürftigen beim Toilettengang.



Komfortable Passform

Der Toiletten-Gurt E-Clip Netz verfügt über eine weite Öffnung am Sitz und extra lange, gepolsterte Beinteile. Die spezielle Gestaltung der Beinschlaufen macht das Anlegen des Gurtes sehr einfach und ermöglicht das reibungslose An- und Auskleiden des Patienten/ Pflegebedürftigen beim Toilettengang oder bei der Körperpflege. Der Hebegurt hat ein starres Rückenteil sowie eine weiche Polsterung unter den Achseln und bietet dem Patienten/ Pflegebedürftigen beim Transfer sicheren und bequemen Halt. Mit diesem Hebegurt lassen sich Patienten/ Pflegebedürftige auch von schmalen Rollstühlen auf Wannensitze und anschließend ins Bad bzw. in die Dusche heben.

Gurt hat zusätzlich eine verstellbare Nackenstütze, die mit den verstellbaren Gurten auch als Kopfstütze eingesetzt werden kann. Die Kopfstütze ist für Patienten/ Pflegebedürftige geeignet, die dazu neigen, sich zu überstrecken und/ oder an herabgesetzter Rumpf- und Kopfbalance leiden.

Flexibel und luftdurchlässig

Das Netzmaterial aus Polyester hat einen geringen Reibungswiderstand, wodurch es sich leicht anlegen lässt. Zudem trocknet der Hebegurt schnell nach dem Baden, Duschen und Waschen. Dank einer gewissen Elastizität schmiegt sich das Material optimal an den Körper der pflegebedürftigen Person an. Der Patient/ Pflegebedürftige kann problemlos auch über den Transfer hinaus für eine kurze Zeit in dem Gurt verweilen. Dieser Hebegurt wurde für die Vier-Punkt- Aufhängung an einem Sitz-/ Liegebügel konzipiert. Zum Kombinieren mit dem mobilen Lifter Diana II Comfort und Diana II 4 MSB.



Korrekte Haltung beim Toilettengang

Da dieser Hebegurt an einem Sitz-/ Liegebügel befestigt wird, kann der Patient/ Pflegebedürftige vor dem Toilettengang in die optimale Position gebracht werden. Der hohe Toiletten-



Mobilitätshilfen



Pflegebetten



Hebelösungen



Hygiene



Pflegestühle

Zubehör



4-Punkt-Sitz-/Liegebügel für Deckenlift HeliQ, erhältlich in den Größen Small (manuell), Medium und Large (elektrisch). Art.-Nr. 92441, 92442 und 92443



4-Punkt-Sitz-/Liegebügel für Diana II Comfort 4ESB (elektrisch). Art.-Nr. 90560



manueller 4-Punkt-Sitz-/Liegebügel für Diana II/Diana II Comfort 4MSB (manuell). Art.-Nr. 90558/90559

Anwendung



Zum und vom Bett

Geeignet für Transfers und Positionierung zu und von einem Bett. Der Patient kann für kurze Zeit auf dem Gurt verweilen.




Zum und vom Stuhl

Geeignet für Transfers und Positionierung zu und von einem Stuhl. Der Patient kann für kurze Zeit auf dem Gurt verweilen.



Duschen


Nur Polyester Netz Stoff kann zum Duschen verwendet werden.

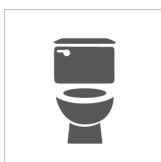

Toilettengang

Nur Polyester Netz Stoff kann zum Toilettengang verwendet werden.

Pflege und Eigenschaften

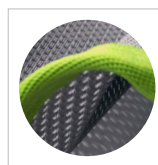


Polyesternetz

Weiches, dünnes, atmungsaktives und schnell trocknendes Material. Ideal zum Baden und Duschen.



E-Clip mit integrierter Sicherung

E-Clip-Verriegelung mit Einhandbedienung. Universell einsetzbar für alle Lifter mit Pilzbefestigung. Ø 6,8–8,2 mm haben.

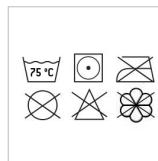


Pflegehinweise

Pflegehinweise auf dem Etikett beachten. Verwenden Sie beim Waschen einen geeigneten Wäschesack.

Technische Daten

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Größe	Farbe	A	B	C
Toiletten-Gurt E-Clip Netz JM	25085C-JM	Junior Medium	JM	28 cm / 11"	73 cm / 28.7"	26 cm / 10.2"
Toiletten-Gurt E-Clip Netz S	25085C-S	Small	S	32 cm / 12.6"	82 cm / 32.3"	30 cm / 11.8"
Toiletten-Gurt E-Clip Netz M	25085C-M	Medium	M	48 cm / 18.9"	90 cm / 35.4"	33 cm / 13"
Toiletten-Gurt E-Clip Netz L	25085C-L	Large	L	50 cm / 19.7"	98 cm / 38.6"	33 cm / 13"
Toiletten-Gurt E-Clip Netz XL	25085C-XL	Extra Large	XL	56 cm / 22"	101 cm / 39.8"	38 cm / 15"
Hoher Toiletten-Gurt E-Clip Netz JM	25090C-JM	Junior Medium	JM	28 cm / 11"	74 cm / 29"	70 cm / 27.5"
Hoher Toiletten-Gurt E-Clip Netz S	25090C-S	Small	S	32 cm / 12.6"	82 cm / 32.2"	74 cm / 29.1"
Hoher Toiletten-Gurt E-Clip Netz M	25090C-M	Medium	M	48 cm / 18.8"	90 cm / 35.4"	79 cm / 31.1"
Hoher Toiletten-Gurt E-Clip Netz L	25090C-L	Large	L	50 cm / 19.6"	98 cm / 38.6"	90 cm / 35.4"
Hoher Toiletten-Gurt E-Clip Netz XL	25090C-XL	Extra Large	XL	56 cm / 11"	101 cm / 50"	100 cm / 39.4"
maximales Benutzergewicht 300 kg						

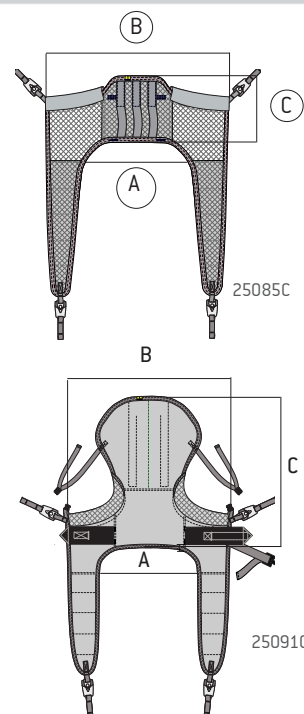

Wir bieten Bewegungsfreiheit und exzellente Pflegequalität.

www.humancaregroup.com

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE GERMANY

Industriestraße 13, Gebäude 1/9
63755 Alzenau
+49 [0] 6023 994 936 8
info.de@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 512 76 7199
info.us@humancaregroup.com