



ovale Form

maximale Unterstützung

sichere E-Clips



## Maximale Unterstützung

Unser Columbus Gurt ist ein ovaler Gurt mit getrennten Beinschlaufen, der sehr gut für Menschen mit begrenzter Rumpfstabilität geeignet ist. Der Gurt ist wahlweise in Polyester oder Polyester Netz erhältlich und bietet eine gute Unterstützung für den gesamten Körper.



**Dem Patienten/Pflegebedürftigen** wird dank der komfortablen Unterstützung von Kopf, Rumpf, Oberschenkeln und Gesäß eine sichere Körperhaltung ermöglicht. Durch seine Form eignet sich der Hebegurt hervorragend für Patienten/ Pflegebedürftige mit eingeschränkter Rumpfstabilität und/oder mit verändertem Körperschwerpunkt z. B. durch amputierte Gliedmaßen oder das Tragen eines Korsetts. In den Hebegurt ist eine bequeme Sitzfläche eingearbeitet, durch die der Patient/Pflegebedürftige auf dem Hebegurt stabil sitzen kann. So gibt der Hebegurt dem Patienten beim Transfer ein rundum geborgenes Gefühl.

dass ein Patient/Pflegebedürftiger mit herabgesetzter Rumpfbalance und/oder mit der Neigung zum Überstrecken aus dem Hebegurt rutscht. Dank integrierter verstärkter Kopfstütze eignet sich dieser Hebegurt sogar zum Anheben von Patienten/Pflegebedürftigen von einer flachen Oberfläche.



**Eine geneigte Position** verringert den Druck auf die Beine der pflegebedürftigen Person erheblich. In Kombination mit einem 4-Punkt-Sitz-/Liegebügel ist diese Position besonders gut zu finden. Die geneigte Position verhindert außerdem,

**Das Soft Air Mesh™ Material** ist ein leichtes, kühles, weiches und atmungsaktives Netzgewebe. Aufgrund seiner feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften sorgt der Stoff dafür, dass Transpiration durch das Gewebe nach außen transportiert wird, wo sie zügig verdunsten kann. Ein weiterer Vorteil des Materials besteht darin, dass es weniger anfällig für Bakterien und somit hygienischer ist. Als „Two-Way Stretch“-Material schmiegt es sich an wie eine zweite Haut. Der Gurt eignet sich zum Kombinieren mit dem mobilen Lifter Diana II Comfort und Diana II 4 MSB.



## Zubehör



**4-Punkt-Sitz-/Liegebügel**  
für Deckenlift HeliQ,  
erhältlich in den Größen  
Small (manuell), Medium  
und Large (elektrisch).  
Art.-Nr. 92441, 92442  
und 92443



**4-Punkt-Sitz-/Liegebügel**  
für Diana II Comfort  
4ESB (elektrisch).  
Art.-Nr. 90560



**manueller 4-Punkt-Sitz-/Liegebügel**  
für Diana II/  
Diana II Comfort 4MSB  
(manuell).  
Art.-Nr. 90558/90559

## Verwendung



**Zum und vom Bett**  
Geeignet für Transfers  
und Positionierung zu  
und von einem Bett.




**Zu um und vom Stuhl**  
Geeignet für Transfers  
und Positionierung zu und  
von einem Stuhl.



**Zum und vom Fußboden**  
Für das Anheben vom  
Boden konzipiert.


## Merkmale

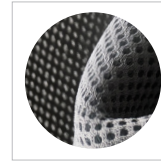

**Soft Air Netz**  
Dank der 3D-Struktur  
des Stoffes wird der  
Druck stark verringert  
und gleichmäßig verteilt.  
Bietet präventive und  
schützende Wirkung.




**E-Clip mit integrierter  
Sicherung**  
E-Clip-Verriegelung mit  
Einhandbedienung.  
Universell einsetzbar für alle  
Lifter mit Pilzbefestigung.  
Ø 6,8–8,2 mm haben.

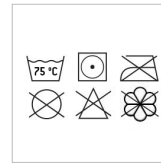

**Pflegeanleitung**  
Pflegehinweise auf  
dem Etikett beachten.  
Verwenden Sie beim  
Waschen einen  
geeigneten Wäschesack.

## Technische Daten

Produkt- bezeichnung	Artikelnum- mer	Größe	Farbe	A	B	C
Columbus Sling E-clip Soft JS	25040C-JS	Junior Small	JS	8 cm / 3.1"	66 cm / 26"	93 cm / 36.6"
Columbus Sling E-clip Soft JM	25040C-JM	Junior Medium	JM	10 cm / 3.9"	68 cm / 26.7"	101 cm / 39.8"
Columbus Sling E-clip Soft S	25040C-S	Small	S	11 cm / 4.3"	75 cm / 29.5"	110 cm / 43.3"
Columbus Sling E-clip Soft M	25040C-M	Medium	M	12 cm / 4.7"	85 cm / 33.4"	118 cm / 46.4"
Columbus Sling E-clip Soft L	25040C-L	Large	L	14 cm / 5.5"	90 cm / 35.4"	128 cm / 50.4"
Columbus Sling E-clip Soft XL	25040C-XL	Extra Large	XL	16 cm / 6.2"	95 cm / 37.4"	137 cm / 54.1"
Columbus Sling E-clip Soft XXL	25040C-XXL	Extra extra large	XXL	17 cm / 6.7"	101 cm / 39.8"	139 cm / 54.7"
Maximum user weight	300 kg / 660 lbs					

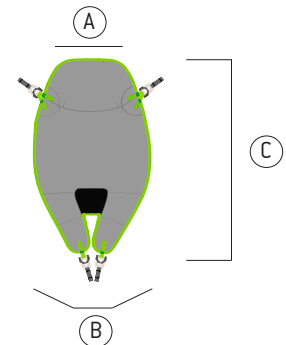

98008; Rev 02; DE; Prd Sheet; Columbus E-clip Sling; Aug 22



*Wir bieten Bewegungsfreiheit  
und exzellente Pflegequalität.*

[www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com)



**HUMAN CARE SWEDEN (HQ)**  
Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
+46 8 665 35 00  
info@humancaregroup.com

**HUMAN CARE CANADA**  
10-155 Colonnade Road  
ON K2E 7K1 Ottawa  
+1 613 723 6734  
info.ca@humancaregroup.com

**HUMAN CARE THE NETHERLANDS**  
Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
+31 577 41 21 71  
info.nl@humancaregroup.com

**HUMAN CARE UNITED STATES**  
8006 Cameron rd, Suite K  
TX 78754 Austin  
+1 5 124 76 7199  
info.us@humancaregroup.com