



komfortable Passform

optimale Unterstützung

sichere E-Clips



## Für eine Vielzahl an Hebesituationen

Unser Ganzkörper-Gurt ist ein äußerst bequemer Gurt und ideal für Personen, die während des Hebevorganges die volle Unterstützung des Körpers benötigen. Dieser Gurt ist mit integrierter Kopfstütze oder mit abnehmbaren Versteifungen erhältlich, falls dieser Gurt längere Zeit (in-situ) verwendet wird.



**Der Ganzkörper-Gurt** bietet dank seiner Form eine komfortable Unterstützung für Kopf, Rumpf und Oberschenkel. Dem Patienten/ Pflegebedürftigen wird dadurch eine stabile Körperhaltung ermöglicht. Dieser Hebegurt bringt den Patienten/Pflegebedürftigen in eine sichere, zurückgelehnte Position und reduziert den Druck auf die Beine. Er bietet optimale Unterstützung für den gesamten Rückenbereich und zusätzlichen Halt durch seine Kopfstütze. Der Gurt ist in zwei verschiedenen Materialien erhältlich und kann in den meisten Transfersituationen und bei nahezu jedem Patienten/Pflegebedürftigen eingesetzt werden. Durch die verstärkte Kopfstütze eignet sich dieser Gurt auch zum Aufnehmen des Patienten/ Pflegebedürftigen von ebenen Flächen oder von Fußböden.

**Polyesternetz ist ein weiches**, dünnes, atmungsaktives und schnell trocknendes Material. Dank seiner leichten Elastizität schmiegt es sich an den Körper an. Der Patient/Pflegebedürftige kann auch über den Transfer hinaus für eine kurze Zeit in dem Gurt verweilen. Dieses Material eignet sich hervorragend zum Duschen und Baden.

**Das Soft Air Mesh™ Material** ist ein leichtes, kühles, weiches und atmungsaktives Netzgewebe. Aufgrund seiner feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften sorgt der Stoff dafür, dass Transpiration durch das Gewebe nach außen transportiert wird, wo sie zügig verdunsten kann. Ein weiterer Vorteil des Materials besteht darin, dass es weniger anfällig für Bakterien und somit hygienischer ist. Als „Two-Way Stretch“-Material schmiegt es sich an wie eine zweite Haut.



## Zubehör



**4-Punkt-Sitz-/ Liegebügel**  
für Deckenlift HeliQ,  
erhältlich in den Größen  
Small (manuell), Medium  
und Large (elektrisch).  
Art.-Nr. 92441, 92442  
und 92443



**4-Punkt-Sitz-/  
Liegebügel**  
für Diana II Comfort  
4ESB (elektrisch).  
Art.-Nr. 90560



**manueller 4-Punkt-Sitz-/  
Liegebügel**  
für Diana II/ Diana II  
Comfort 4MSB (manuell)  
Art.-Nr. 90558/90559



**In-Situ**  
Der Ganzkörpergurt In-Situ  
E-Clip hat abnehmbare  
Rippen für den Fall,  
dass der Gurt hinter  
dem Pflegebedürftigen  
verbleibt. Art. -Nr. 25011C

## Anwendung



**Zum und vom Bett**  
Geeignet für Transfers  
und Positionierung zu  
und von einem Bett.



**Zum und vom Stuhl**  
Geeignet für Transfers  
und Positionierung zu  
und von einem Stuhl.




**Duschen**  
Netzmaterial aus  
Polyester ist für feuchte  
Umgebungen geeignet.



**Zum und vom Fußboden**  
Für das Anheben vom  
Boden konzipiert.

## Merkmale

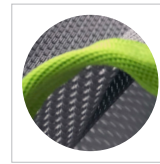


**Polyesternetz** weiches,  
dünnes, atmungsaktives  
und schnell trocknendes  
Material. Ideal zum  
Duschen und Baden.  
Art.-Nr. 25005C.



**E-Clip mit integrierter  
Sicherung**  
E-Clip-Verriegelung mit  
Einhandbedienung. Univer-  
sall einsetzbar für alle  
Lifter mit Pilzbefestigung.  
Ø 6,8–8,2 mm haben.




**Soft Air Netz**  
Dank der 3D-Struktur  
des Stoffes wird der  
Druck stark verringert  
und gleichmäßig verteilt.  
Bietet präventive und  
schützende Wirkung.  
Art. -Nr. 25010C/25011C

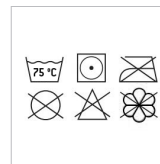

**Pflegeanleitung**  
Pflegehinweise auf  
dem Etikett beachten.  
Verwenden Sie beim  
Waschen einen  
geeigneten Wäschesack.

## Technische Daten

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Größe	Farbe	A	B	C
Full Body Sling E-clip Net JS	25005C-JS	Junior Small	JS	16 cm /	63 cm /	76 cm /
Full Body Sling E-clip Soft JS	25010C-JS			6.3"	24.8"	29.9"
Full Body Sling In-Situ E-clip JS	25011C-JS					
Full Body Sling E-clip Net JM	25005C-JM	Junior Medium	JM	19 cm /	67 cm /	80 cm /
Full Body Sling E-clip Soft JM	25010C-JM			7.5"	26.4"	31.5"
Full Body Sling In-Situ E-clip JM	25011C-JM					
Full Body Sling E-clip Net S	25005C-S	Small	S	31 cm /	85 cm /	90 cm /
Full Body Sling E-clip Soft S	25010C-S			13.8"	30.3"	35.4"
Full Body Sling In-Situ E-clip S	25011C-S					
Full Body Sling E-clip Net M	25005C-M	Medium	M	40 cm /	92 cm /	91 cm /
Full Body Sling E-clip Soft M	25010C-M			15.7"	34.6"	35.8"
Full Body Sling In-Situ E-clip M	25011C-M					
Full Body Sling E-clip Net L	25005C-L	Large	L	40 cm /	98 cm /	100 cm /
Full Body Sling E-clip Soft L	25010C-L			17.3"	38.6"	39.3"
Full Body Sling In-Situ E-clip L	25011C-L					
Full Body Sling E-clip Net XL	25005C-XL	Extra Large	XL	44 cm /	105 cm /	102 cm /
Full Body Sling E-clip Soft JS	25010C-XL			18.9"	41.3"	40.1"
Full Body Sling In-Situ E-clip XL	25011C-XL					
Full Body Sling E-clip Net XXL	25005C-XXL	Extra Large [2x]	XXL	44 cm /	111 cm /	106 cm /
Full Body Sling E-clip Soft XXL	25010C-XXL			18.9"	43.7"	41.7"
Full Body Sling In-Situ E-clip XXL	25011C-XXL					
Full Body Sling E-clip Net XXXL	25005C-XXXL	Extra Large [3x]	XXXL	44 cm /	118 cm /	108 cm /
Full Body Sling E-clip Soft XXXL	25010C-XXXL			18.9"	46.4"	42.5"
Full Body Sling In-Situ E-clip XXXL	25011C-XXXL					
Maximum user weight		300 kg / 660 lbs				

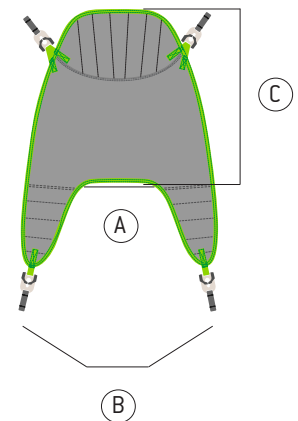

98011, Rev.03, DE Product sheet, Full Body Sling E-clip, Aug. 2022



**HUMAN CARE SWEDEN (HQ)**  
Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
+46 8 665 35 00  
info@humancaregroup.com

**HUMAN CARE CANADA**  
10-155 Colonnade Road  
ON K2E 7K1 Ottawa  
+1 613 723 6734  
info.ca@humancaregroup.com

**HUMAN CARE THE NETHERLANDS**  
Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
+31 577 41 21 71  
info.nl@humancaregroup.com

**HUMAN CARE UNITED STATES**  
8006 Cameron rd, Suite K  
TX 78754 Austin  
+1 5 124 76 7199  
info.us@humancaregroup.com