



komfortable Passform

optimale Unterstützung

sichere E-Clips



Für eine Vielzahl an Hebesituationen

Unser Ganzkörper-Gurt ist ein äußerst bequemer Gurt und ideal für Personen, die während des Hebevorganges die volle Unterstützung des Körpers benötigen. Dieser Gurt ist mit integrierter Kopfstütze oder mit abnehmbaren Versteifungen erhältlich, falls dieser Gurt längere Zeit (in-situ) verwendet wird.



Der Ganzkörper-Gurt bietet dank seiner Form eine komfortable Unterstützung für Kopf, Rumpf und Oberschenkel. Dem Patienten/ Pflegebedürftigen wird dadurch eine stabile Körperhaltung ermöglicht. Dieser Hebegurt bringt den Patienten/Pflegebedürftigen in eine sichere, zurückgelehnte Position und reduziert den Druck auf die Beine. Er bietet optimale Unterstützung für den gesamten Rückenbereich und zusätzlichen Halt durch seine Kopfstütze. Der Gurt ist in zwei verschiedenen Materialien erhältlich und kann in den meisten Transfersituationen und bei nahezu jedem Patienten/Pflegebedürftigen eingesetzt werden. Durch die verstärkte Kopfstütze eignet sich dieser Gurt auch zum Aufnehmen des Patienten/ Pflegebedürftigen von ebenen Flächen oder von Fußböden.



Polylesternetz ist ein weiches, dünnes, atmungsaktives und schnell trocknendes Material. Dank seiner leichten Elastizität schmiegt es sich an den Körper an. Der Patient/Pflegebedürftige kann auch über den Transfer hinaus für eine kurze Zeit in dem Gurt verweilen. Dieses Material eignet sich hervorragend zum Duschen und Baden.

Das Soft Air Mesh™ Material ist ein leichtes, kühles, weiches und atmungsaktives Netzgewebe. Aufgrund seiner feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften sorgt der Stoff dafür, dass Transpiration durch das Gewebe nach außen transportiert wird, wo sie zügig verdunsten kann. Ein weiterer Vorteil des Materials besteht darin, dass es weniger anfällig für Bakterien und somit hygienischer ist. Als „Two-Way Stretch“-Material schmiegt es sich an wie eine zweite Haut.



Mobility Aids



Healthcare Beds



Lifting Solutions



Hygiene



Convertible Chairs

Zubehör



4-Punkt-Sitz-/ Liegebügel
für Deckenlift HeliQ,
erhältlich in den Größen
Small (manuell), Medium
und Large (elektrisch).
Art.-Nr. 92441, 92442
und 92443



**4-Punkt-Sitz-/
Liegebügel**
für Diana II Comfort
4ESB (elektrisch).
Art.-Nr. 90560



**manueller 4-Punkt-Sitz-/
Liegebügel**
für Diana II/ Diana II
Comfort 4MSB (manuell)
Art.-Nr. 90558/90559



In-Situ
Der Ganzkörpergurt In-Situ
E-Clip hat abnehmbare
Ribben für den Fall,
dass der Gurt hinter
dem Pflegebedürftigen
verbleibt. Art. -Nr. 25011C

Anwendung



Zum und vom Bett
Geeignet für Transfers
und Positionierung zu
und von einem Bett.



Zum und vom Stuhl
Geeignet für Transfers
und Positionierung zu
und von einem Stuhl.



Duschen
Netzmaterial aus
Polyester ist für feuchte
Umgebungen geeignet.



Zum und vom Fußboden
Für das Anheben vom
Boden konzipiert.

Merkmale




Polyesternetz weiches,
dünnes, atmungsaktives
und schnell trocknendes
Material. Ideal zum
Duschen und Baden.
Art.-Nr. 25005C.



**E-Clip mit integrierter
Sicherung**
E-Clip-Verriegelung mit
Einhandbedienung. Univer-
sell einsetzbar für alle
Lifter mit Pilzbefestigung.
Ø 6,8–8,2 mm haben.




Soft Air Netz
Dank der 3D-Struktur
des Stoffes wird der
Druck stark verringert
und gleichmäßig verteilt.
Bietet präventive und
schützende Wirkung.
Art. -Nr. 25010C/25011C

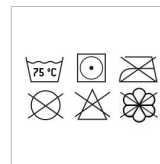

Pflegeanleitung
Pflegehinweise auf
dem Etikett beachten.
Verwenden Sie beim
Waschen einen
geeigneten Wäschesack.

Technische Daten

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Größe	Farbe	A	B	C
Full Body Sling In-Situ E-clip JS Full Body Sling In-Situ E-clip Net JS	25011C-JS 25006C-JS	Junior Small	JS	16 cm / 6.3"	63 cm / 24.8"	76 cm / 29.9"
Full Body Sling In-Situ E-clip JM Full Body Sling In-Situ E-clip Net JM	25011C-JM 25006C-JM	Junior Medium	JM	19 cm / 7.5"	67 cm / 26.4"	80 cm / 31.5"
Full Body Sling In-Situ E-clip S Full Body Sling In-Situ E-clip Net S	25011C-S 25006C-S	Small	S	31 cm / 13.8"	85 cm / 30.3"	90 cm / 35.4"
Full Body Sling In-Situ E-clip M Full Body Sling In-Situ E-clip Net M	25011C-M 25006C-M	Medium	M	40 cm / 15.7"	92 cm / 34.6"	91 cm / 35.8"
Full Body Sling In-Situ E-clip L Full Body Sling In-Situ E-clip Net L	25011C-L 25006C-L	Large	L	40 cm / 17.3"	98 cm / 38.6"	100 cm / 39.3"
Full Body Sling In-Situ E-clip XL Full Body Sling In-Situ E-clip Net XL	25011C-XL 25006C-XL	Extra Large	XL	44 cm / 18.9"	105 cm / 41.3"	102 cm / 40.1"
Full Body Sling In-Situ E-clip XXL Full Body Sling In-Situ E-clip Net XXL	25011C-XXL 25006C-XXL	Extra Large (2x)	XXL	44 cm / 18.9"	111 cm / 43.7"	106 cm / 41.7"
Full Body Sling In-Situ E-clip XXXL Full Body Sling In-Situ E-clip Net XXXL	25011C-XXXL 25006C-XXXL	Extra Large (3x)	XXXL	44 cm / 18.9"	118 cm / 46.4"	108 cm / 42.5"
Maximum user weight		300 kg / 660 lbs				

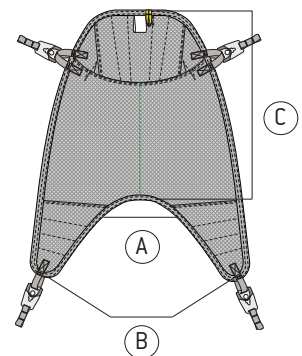

98011, Rev4, DE Product sheet, Full Body Sling E-clip, Aug25



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 512 76 7199
info.us@humancaregroup.com