




Rückenstütze

aufrechte Sitzhaltung

optimale
Unterstützung

Polyester Net
Art. Nr. 25045

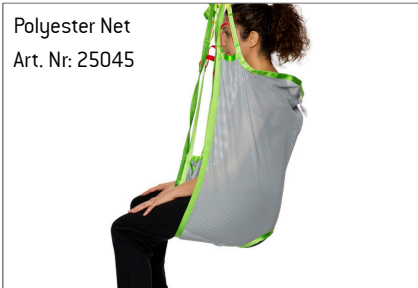

Unser Basis-Hebegurt passt sich dem Körper des Patienten/ pflegebedürftigen an und bietet optimale Unterstützung für den gesamten Rückenbereich. Dieser Gurt ist in 3 Materialien erhältlich. Er ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn der Gurt von mehreren Patienten/ Pflegebedürftigen benutzt werden soll.

Polyester
Art. Nr. 25070



Drei Materialien zur Auswahl

Dieser Gurt ist in Polyester, Polyesternetz und Soft Air Mesh erhältlich. Soft Air Mesh und Polyesternetz eignen sich hervorragend, um Feuchtigkeit und Hitze vom Patienten/ Pflegebedürftigen abzuleiten. So kann der Patient/ Pflegebedürftige auch über den Transfer hinaus für eine kurze Zeit in dem Gurt verweilen. Das Polyesternetz ist flexibel, luftdurchlässig und trocknet schnell. Somit ist das Material für den Einsatz in Nassräumen geeignet.

Mit dem Basis-Hebegurt ist es einfach, eine geeignete Position für den Patienten/ Pflegebedürftigen zu finden, wenn er auf einem Stuhl oder Rollstuhl positioniert werden soll. Der Gurt kann wahlweise mit einer 2-Punkt-, 3-Punkt- oder 4-Punkt-Aufhängung verwendet werden.

Soft Air Mesh
Art. Nr. 25054



Aufrechtes Sitzen

Unser Basis-Hebegurt bietet eine gute Unterstützung für den gesamten Rücken, hat jedoch keine Kopfstütze, Verstärkungen oder Polsterungen. Er eignet sich für Patienten/ Pflegebedürftige mit geringer Rumpfstabilität und Schwierigkeiten beim aufrechten Sitzen.

Vereinfachte Pflege und Anpassung

Unsere Hebegurte werden nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Sie verfügen über verstärkte Schlaufen und sind mit extrem festem Nylongewebe ummantelt, damit sie auch bei intensivster Nutzung robust und wiederstandsfähig sind. Jedes Hebegurtekkett trägt einen Farbcode, um eine schnelle und einfache Auswahl des richtigen Hebegurts zu gewährleisten. Die Schlaufen sind ebenfalls mit einem Farbcode versehen, um die erforderliche Positionierung einfach festlegen zu können. Die Vielseitigkeit dieses Gurtes macht ihn zu einem komfortablen Helfer bei der täglichen Pflege.



Gehhilfen



Pflegebetten



Hebelösungen



Hygiene



Pflegestühle

Zubehör



Verlängerungsschlaufen
Zur Erweiterung des Gurtes, um die Hebeposition zu ändern oder Beinteile zusammenzuhalten. Verschiedene Längen erhältlich.
Art.-Nr.: 21180-*



Beinpolsterung und Stützen
Beinpolsterung und Stützen - ideal für druckempfindliche Patienten.
Art.-Nr.: 21146-S, M, L
Verstärkte Stützen
Einheitsgröße Art.-Nr.: 25102



gepolsterte Abdeckung
Schützt den Patienten vor Verletzungen mit dem Hebebügel. Nicht zur Verwendung in feuchter Umgebung.
Art.-Nr.: 50866



Hebebügel für 2-, 3- oder 4-Punkt-Aufhängung
Artikel-Nr. 57551, 55764 (2- oder 3-Punkt-Schnellspanner), 55619 (4-Punkt-Anbringung Beinhaken)

Anwendung



Transfer in das / aus dem Bett
Geeignet für Transfers und Positionierung zu und von einem Bett. Der Patient kann für kurze Zeit auf dem Gurt verweilen.



Transfer auf den / vom Stuhl
Geeignet für Transfers und Positionierung zu und von einem Stuhl. Der Patient kann für kurze Zeit auf dem Gurt verweilen.




Transfer um und vom Fußboden
Für das Anheben vom Boden konzipiert.




Einsatz beim Duschen
Nur Netzmaterial aus Polyester ist für feuchte Umgebungen geeignet.


Pflege und Eigenschaften

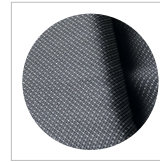


Polyesternetz
Weiches, dünnes Material, das atmungsaktiv ist und schnell trocknet. Ideal zum Baden oder Duschen.

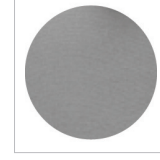

Polyester
Langlebig, geringe Reibung, lässt sich einfach reinigen und ermöglicht eine leichte Positionierung.

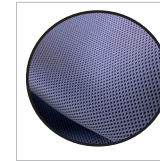


Soft Air Mesh
Leichtes, kühlendes und atmungsaktives Material. Geeignet für Patienten/Pflegebedürftige mit empfindlicher Haut.

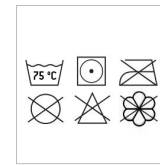

Pflegehinweise
Pflegehinweise auf dem Etikett beachten. Verwenden Sie beim Waschen einen geeigneten Wäschesack.

Technische Daten

Artikelnummer	Größe	Farbe	A	B	C		
Polyesternetz	Soft Air Mesh	Polyester					
25045-JS	25054-JS	25070-JS	Junior Small	JS	22 cm / 8,7"	62 cm / 24,4"	50 cm / 19,7"
25045-JM	25054-JM	25070-JM	Junior Medium	JM	28 cm / 11"	65 cm / 25,6"	54 cm / 21,3"
25045-S	25054-S	25070-S	Small	S	35 cm / 13,8"	77 cm / 30,3"	58 cm / 22,8"
25045-M	25054-M	25070-M	Medium	M	40 cm / 15,7"	88 cm / 34,6"	63 cm / 24,8"
25045-L	25054-L	25070-L	Large	L	44 cm / 17,3"	98 cm / 38,6"	65 cm / 25,6"
25045-XL	25054-XL	25070-XL	Extra Large	XL	48 cm / 18,9"	102 cm / 40,2"	70 cm / 27,6"
Maximales Nutzergewicht		300 kg / 660 lb					

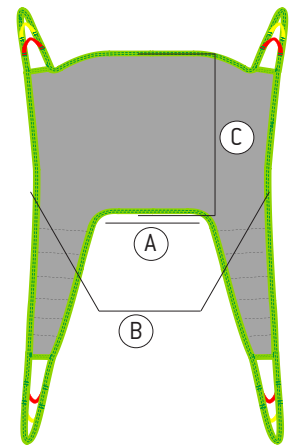

* in verschiedenen Längen erhältlich: 10 cm / 3,9" [21180-10], 15 cm / 5,9" [21180-15], 20 cm / 7,8" [21180-20], 25 cm / 9,8" [21180-25], 35 cm / 13,7" [21180-35]



Wir bieten Bewegungsfreiheit und exzellente Pflegequalität.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE GERMANY
Industriestraße 13, Gebäude 1/9
63755 Alzenau
+49 (0) 6023 994 936 8
infode@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 512 76 7199
info.us@humancaregroup.com