



stabil


kompaktes Design

ergonomisch



Elektrisch höhenverstellbarer und kippbarer Dusch- /WC-Stuhl

Mit unserem Dolphin II kann die Körperhygiene ergonomisch durchgeführt werden. Während sich der Patient/Pflegebedürftige in einer entspannten, geneigten Ausgangsposition befindet, kann die Pflegekraft rückschonend die Pflege übernehmen.

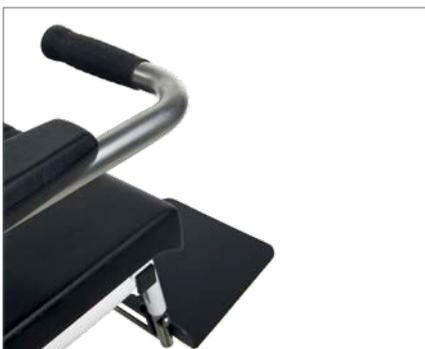

Durch den großen Einstellbereich der Sitzhöhe ist eine optimale Pflege möglich. Der Sitz und die Rückenlehne neigen sich als Gesamtheit, wodurch der Patient/Pflegebedürftige stabil sitzen bleibt. Die elektrisch verstellbare Neigung erfolgt stufenlos. So können der Patient/Pflegebedürftige und die Pflegekraft mit nur einem Handgriff und ohne jegliche Anstrengung eine angenehme Körperhaltung finden. Der Duschstuhl verfügt außerdem über eine Aufstehhilfe.

Winkel verstellbar werden kann. Durch das ergonomische Design liegt der Kopf stabil und bequem in der Kopfstütze.

Die Fußplatte ist höhenverstellbar, um Patienten/Pflegebedürftige unterschiedlichster Körpergrößen die passende Unterstützung der Füße zu bieten.



Die Armlehnen bieten für den Patienten/Pflegebedürftigen eine zusätzliche Sicherheit gegen das Hinausfallen. Die Armlehnen sind leicht wegklappbar, so dass sie beim Aufstehen bzw. Hinsetzen nicht im Wege stehen.

Aufgrund seiner kompakten Größe eignet sich der Duschstuhl Dolphin II ideal für den Einsatz in Bereichen mit begrenztem Platz – sowohl zu Hause, bei schmalen Türöffnungen, als auch in Sanitärräumen. Das Manövrieren des Duschstuhls verläuft dank der hochwertigen Doppellenkrollen mit großem Durchmesser sehr leicht. Diese und viele andere Faktoren machen den Dolphin II zu einem nachhaltigen Qualitätsprodukt.

Dolphin II ist mit einer Kopfstütze ausgestattet, die in Höhe, Tiefe und im



Mobilitätshilfen



Pflegebetten



Hebelösungen



Hygiene



Umwandelbare Stühle

Zubehör



Toiletteimer
Toiletteimer, inklusive Deckel.
Artikelnr. 04-M0312-0016



Toilettensitz
Toilettensitz mit Schließteil für die schlüssellochförmige Öffnung für zusätzlichen Komfort.
Artikelnr. 04-M0307-0009



Akku
Zusätzlicher Akku, sodass der Lifter immer einsatzbereit ist.
Artikelnr. 04-N0101-0012



Externes Ladegerät
Ladegerät zum externen Aufladen des Akkus.
Artikelnr. 04-N0105-0018

Verwendung



Körperpflege
Bietet dem Pflegepersonal Unterstützung bei der Körperpflege, wie z. B. Intimhygiene und An-/Auskleiden.



Ergonomisch
Die gute Manövrierbarkeit und Höhenverstellung verbessern die Körperhaltung der Pflegekraft, was die körperliche Belastung reduziert.



Toilettengang
Fahrbar zur Toilette. Unterstützung beim Toilettengang. Geeignet für wandhängende Toiletten. Verwendung mit Toiletteimer möglich.



Duschen
Fahrbar zum Badezimmer. Bietet eine bequeme und sichere Unterstützung beim Duschen und Waschen (IPx5, spritzwassergeschützt).

Merkmale



Lenkrollen
4 doppelte Lenkrollen mit Bremse (Ø 125 mm).



Handbedienung
Handbedienung, einfach zu bedienen, ergonomisches Design mit Spiralkabel.



Fußplatte
Höhenverstellbare, rutschfeste, horizontale Fußplatte. Zusammenklappbar zum Transport.



Kopfstütze
In Höhe, Tiefe und im Winkel verstellbare PUR-Kopfstütze zur sicheren und bequemen Unterstützung von Kopf und Nacken.

Technische Daten

Spezifikationen	Dolphin II, 90561
Länge	920 mm
Breite	670 mm
Sitzhöhe	480-1000 mm
Höhe Schiebegriff (min/max)	1020-1310 mm
Sitzgröße	420x430 mm
Neigung	-5° bis +26°
Durchmesser Lenkrolle mit Bremse	125 mm
Maximales Benutzergewicht	180 kg
Maximales Gewicht pro Armlehne	80 kg
Wendekreis	1100 mm
Wasserdichtigkeit	IPX5 (spritzwassergeschützt)
Wasserdichtigkeit Handbedienung und Antriebszylinder	IPX6

Spezifikationen	Dolphin II, 90561
Kopfstütze	verstellbar in Höhe, Tiefe und im Winkel
Akku (inklusive Ladekabel)	Kapazität 2,9 Ah
Ladegerät, in Steuerkasten integriert	100-240/50/60 V/Hz
Material Fahrgestell	pulverbeschichteter Stahl
Material Sitz, Rückenlehne, Kopfstütze	PUR
Toilettensitz	mit integrierter Führungsschiene für Toiletteimer
Armlehnen	einzelns zusammenklappbar, mit integrierter Frontstütze
Fußplatte	zusammenklappbar, höhenverstellbar, rutschfest
Funktionen Handbedienung	nach oben/unten, Neigung, Batteriestatus, Serviceanzeige
Zubehör	Sicherheitsgurt (90562), längenverstellbar



Wir bieten Bewegungsfreiheit und exzellente Pflegequalität.

www.humancaregroup.com

