



Unser Altair Deckenlifter zeichnet sich durch sein modernes Design und Leichtigkeit aus. Er ist tragbar und kann so in verschiedenen Räumen genutzt werden, was sich kostensparend auswirkt. Der Lift ist in drei Gewichtsklassen erhältlich.

Unschlagbarer Komfort

Der Altair bietet einen optimalen Komfort, wenn er mit unserem Gurtprogramm kombiniert wird. Für den Altair ist ein Drehbügel mit Sicherheitsverschluss in zwei unterschiedlichen Breiten verfügbar, die für die verschiedensten Anwender und unterschiedlichsten Bedürfnisse passend sind. Mit Gewichtskapazitäten von 150 kg, 220 kg und 300 kg ist der Altair die optimale Lösung für Einrichtungen, die vielseitige Hebelösungen benötigen.

Intelligentes Liftsystem

Der Altair verfügt über eine erweiterte Technologie-Plattform, die die Verfolgung der Liftnutzung und Visualisierung der gesammelten Daten ermöglicht. Die gespeicherten Daten können durch unseren Servicetechniker auf einem Tablet oder Computer

abgerufen werden. Detaillierte Informationen können direkt angezeigt oder auf andere Medien exportiert werden, um zusätzliche Analysen vorzunehmen.

Optimale Ausstattung

Der Altair ist mit einer anwenderfreundlichen Handbedienung ausgestattet und verfügt zusätzlich über ein Bedienfeld auf der rechten Seite des Lifters. Die 3-Punkt Gurthängung ermöglicht eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und eine bequeme Sitzposition. Der sanfte Hebevorgang und die konstante Hubgeschwindigkeit sind für den Patienten, ungeachtet seines Gewichtes, sehr angenehm. Der Altair bietet zwei Geschwindigkeitsstufen, eine hohe Akkuleistung und bequemes Aufladen über die Handbedienung.

Zubehör



Drehbügel

Schnellverschluss für optimalen Komfort. Bestellung separat.
 Artikelnr.: 55751 (45 cm)
 55764 (55 cm)



Abdeckcover

Schützt den Benutzer vor Verletzungen. Bestellung separat.
 Artikelnr.: 50866



4-Punkt Aufhängung

Ermöglicht die Gurteinhängung an vier Aufnahmepunkten.
 Artikelnr.: 55619



Transportwagen

Vereinfacht den Transport des Lifters zwischen den Räumen. Bequeme Aufbewahrung der Gurte.
 Artikelnr.: 50346



Elektr. Sitz-Liegebügel

Stufenloses, gleichmäßiges Anheben. Zum Einsatz von Gurten mit Klipsaufhängung.
 Artikelnr.: S 92441, M 92442, L 92443



Ladegerät mit Halterung

Einfach an der Wand zu montieren.
 Artikelnr.: 50899



Distanzgurt

Stabiles Nylongewebe mit Metallhaken. Verlängert den Zuggurt bis 100 cm.
 Artikelnr.: 20124-xx (Länge angeben)



Waage

Medizinische Waage. Maximale Kapazität: 320 kg. ISO und EN konform.
 Artikelnr.: 50348



Handbedienung

2 Geschwindigkeiten mit Auf/Ab Modus. Eingang für Ladegerät und USB-Schnittstelle.
 Wasserschutzklasse: IPX5
 Artikelnr.: 71457




Fangstücke / Drehscheiben

Bietet zusätzliche Optionen für das Schienensystem.
 Artikelnr.: 55721 (Fangstück), 91884 (Drehscheibe)



Zusätzliches Bedienfeld

Bedienfeld auf der Rückseite des Lifters für die Not-Aus Funktion. Im Lieferumfang enthalten.

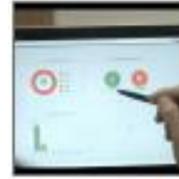

Intelligentes Liftsystem

Intelligente, Cloud basierende Technologieplattform, die die Speicherung von Daten ermöglicht. Im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Beschreibung	Altair 150	Altair 220	Altair 300
Artikelnr. (Lifter)	55200H	55210H	55220H
Artikelnr. (Bügel)	55751 (45 cm) oder 55764 (55 cm)	55751 (45 cm) oder 55764 (55 cm)	55751 (45 cm) oder 55764 (55 cm)
Abmessungen (BxHxL)	40cm x 14 cm x 30 cm		
Belastbarkeit	150 kg	220 kg	300 kg
Gewicht des Lifters	7,4 kg		
Gewicht des Bügels	1,3kg (55751), 1,5kg (55764)		
Batterie	2,3Ah, 2x12V		
Ladegerät	Eingang: 100-240V, AC 50 -60 Hz Ausgang: 27.8V, 0.8A DC		
IP Klasse	Lift: IPX4 Handbedienung: IPX5		
Hubhöhe	Hubhöhe: 208 cm		
Hubgeschwindigkeit	Hubgeschwindigkeit: 1,8 m/Min. – 3 m/Min.		
Zulassung	ROHS-2 Zulassung, getestet und zugelassen nach ISO 10535:2006 ETL gelistet		
Notablass	elektronisch und mechanisch		

This product is manufactured in accordance with all relevant ISO standards.



Learn more about this product



Follow Us on Social Media



facebook.com/humancareworld



instagram.com/humancaregroup



linkedin.com/company/human-care-ab



pinterest.com/humancaregroup



youtube.com/channel/UC7fjInh3zTjRx0P1Df2Da0